

Allura II


Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Die innovativen Pflegebetten



Allura II - Die innovativen Pflegebetten, auch für schwergewichtige Patienten

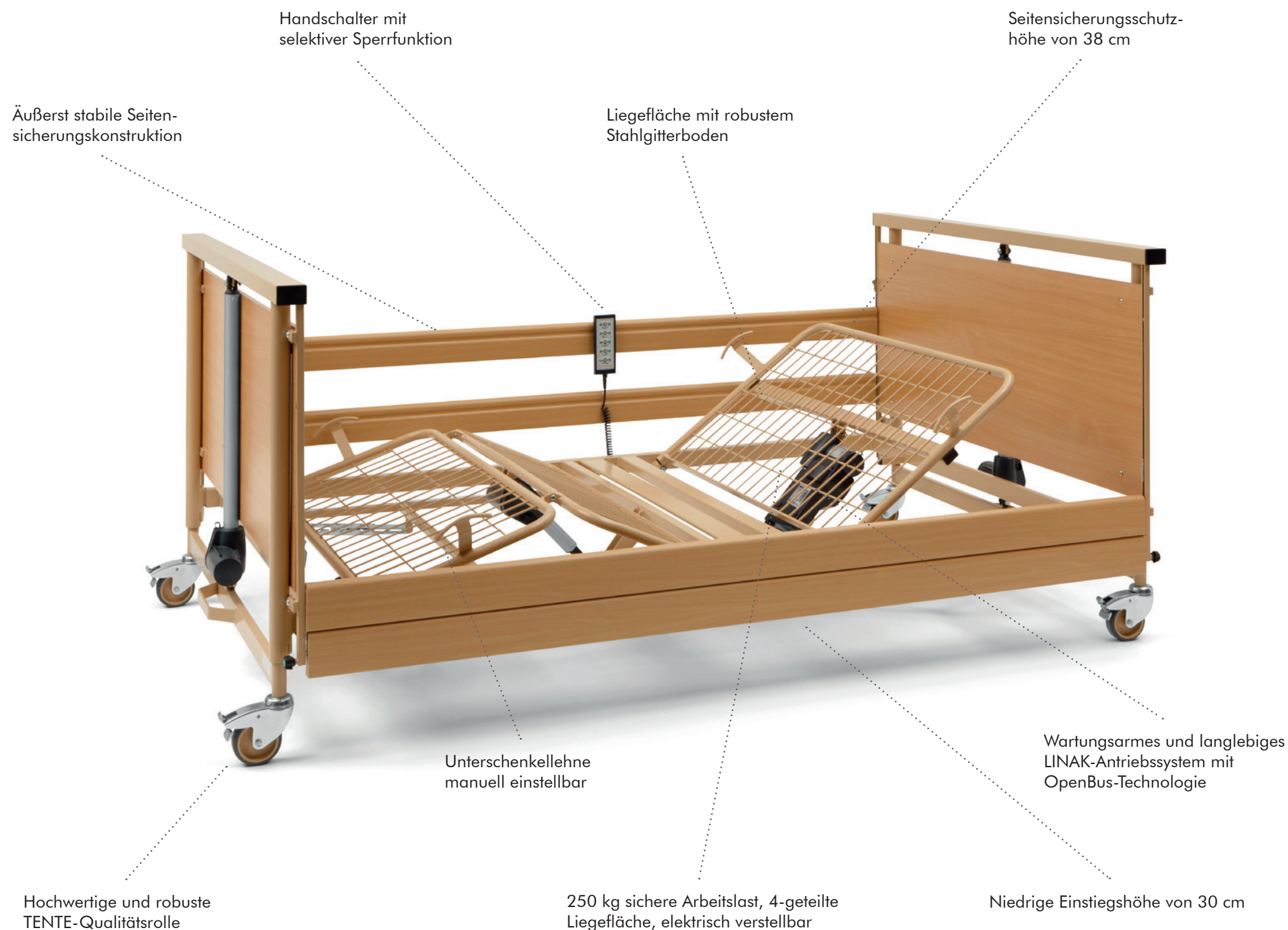

Ihre Vorteile

Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Allura II“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

Niedrige Einstiegshöhe und 250 kg Arbeitslast

Die Allura-II-Pflegebettenserie ist mit den Liegeflächenabmessungen 90 x 200, 100 x 200 oder 120 x 200 cm lieferbar. Die sichere Arbeitslast beträgt 250 kg, somit ist das Pflegebett auch für schwergewichtigere Personen bestens geeignet. Die Liegehöhenverstellung ist von 30 - 80 cm einstellbar. Der außergewöhnlich große Verstellbereich von 50 cm sichert ein Höchstmaß an Pflegekomfort.

24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

Seitensicherungsschutzhöhe 38 cm

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 16 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitensicherungserhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.

Details



Fußtieflagerung



Verstellbereich von 30 bis 80 cm



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion



Platzsparende Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe (Abb. ähnlich)

Pflegebett **Allura II**

Ausführung

- Liegefläche: 90 x 200 cm (Allura II), 100 x 200 cm (Allura II 100) oder 120 x 200 cm (Allura II 120), 4-geteilt, Liegehöhenverstellung von 30 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteillösungen im Buche Dekor
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- 24-Volt-Antriebssystem


Gefertigt nach: Norm DIN EN 60601-2-52: 2010



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 12/2016, Version 5, Artikel-Nr. 600629.

Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)

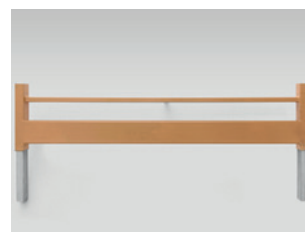

Bettverlängerung
(auch nachträglich montierbar)



Leselampen



Schaumlederbezug



Servierblech für Allura II und
Allura II 100



Holzfüllung zur Verkleidung des
Fahrgestells (auch nachträglich
montierbar)

Bestellnummern und Außenmaße

51.5024.33	Pflegebett Allura II (Holzseitensicherungen), Länge 224 cm, Breite 101 cm
51.5524.33	Pflegebett Allura II 100 (Holzseitensicherungen), Länge 224 cm, Breite 111 cm
51.5724.33	Pflegebett Allura II 120 (Holzseitensicherungen), Länge 224 cm, Breite 131 cm
19.1400.1	Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)



BINDER
REHAB

Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch



BURMEIER
Stieglmeyer-Gruppe