

Westfalia IV

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Das Pflegebett
für mehr Wohnlichkeit

Westfalia IV - Das Pflegebett für mehr Wohnlichkeit

Ihre Vorteile

Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Westfalia IV“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt werden. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert. Bewohner finden optimale Pflegebedingungen vor. Die pflegenden Personen werden im täglichen Einsatz wesentlich entlastet.

Wirtschaftlichkeit

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie.

24-Volt-Antriebssystem

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

Unterschenkellehne
manuell einstellbar

Hochwertige und robuste
TENTE-Qualitätsrollen

Wartungsarmes und langlebiges
LINAK-Antriebssystem

185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Unterschiedliche
Holzumbauten lieferbar

Details




Handschalter
mit selektiver
Sperrfunktion



Rollen einzeln
bremsbar



Höhenverstellbereich
35 - 80 cm

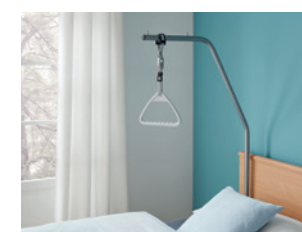

Aufrichter



Häupter zur Auswahl:
Standard (serienmäßig),
Comodo mit Rundstollen
(optional), Primero mit
Griffleiste (optional)

Pflegebett **Westfalia IV**

Ausführung

- Liegefläche 90 x 200 cm, 4-geteilt, mit elektromotorisch verstellbarer Rücken- und Oberschenkellehne, Liegehöhenverstellung durch Elektromotor von 35 - 80 cm einstellbar, Holzbau mit integrierten Seitensicherungen
- Liegefläche mit Federholzleisten, mittig teilbar – Metall-Liegefläche optional (nur 90 x 200 cm)
- Fahrgestell mit Einzelradfeststellung
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 185 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2016



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2017. Version 1. Artikel-Nr. 600697.

Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Serviertablett



Aufstehhilfe



Adaptierbare Seitensicherung



Wandabweisrolle inkl. Halterung



Leselampen



Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholme (auch nachträglich montierbar)



Schaumlederbezug

Bestellnummern und Außenmaße (für Liegeflächen mit Federholzleisten)

Bestellnummer	Liegeflächenmaß	Außenmaß	Bestellnummer	Liegeflächenmaß	Außenmaß
51.2431.11 S	80 x 200 cm	90 x 212 cm	51.2431.11 S	90 x 220 cm	100 x 232 cm
51.2431.11 S	90 x 200 cm	100 x 212 cm	51.2431.11 S	100 x 200 cm	110 x 212 cm
51.2431.11 S	90 x 190 cm	100 x 202 cm	51.2431.11 S	100 x 220 cm	110 x 232 cm
51.2431.11 S	90 x 180 cm	100 x 192 cm			
19.1400.1	Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)				

Lieferbar ab August 2017



**BINDER
REHAB**

Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch

