



STARRRAHMEN OHNE KOMPROMISSE. (4) SEHR KOMPAKT UND LEICHT -DER MACHT ALLES MIT!



TECHNISCHE DATEN

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeit in km/h, Maßtoleranzen \pm 10 mm, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

mit Radsturz in Grad / mm	0°	3°
	min. 490 /	min. 540 /
	max. 690	max. 740
	SB +170	SB + 240
Sitzflächenhöhe an Vorderkante (VSH) in mm	min. 450 / max. 530	
Sitzflächenhöhe an hinterer Kante (HSH) in mm	min. 350 / max. 510	
Gesamthöhe in mm	min. 600 / max. 970	
Rückengurthöhe in mm	jeweils um +/- 15 verstellbar	
Rückenhöhe in mm	min. 250 / max. 450	
Sitzbreite in mm	min. 300 / max. 500	
Sitztiefe in mm	380 – 500	
Rahmen kurz in mm	min. 760 / max. 840	
Rahmen mittel in mm	min. 800 / max. 880	
Rahmen lang in mm	min. 840 / max. 920	

Gewichte

zul. Gesamtgewicht in kg	max. 139,5	
max. Nutzergewicht (inkl. Zuladung) in kg	130	
Leergewicht in kg	ab 9,5	
	ab 6,5	
Transportgewicht in kg	(ohne Seitenteil, Sitzkissen,	
	Antriebsräder)	


LMEYRA®





//DIE NEUE GENERATION AKTIVROLLSTÜHLE//



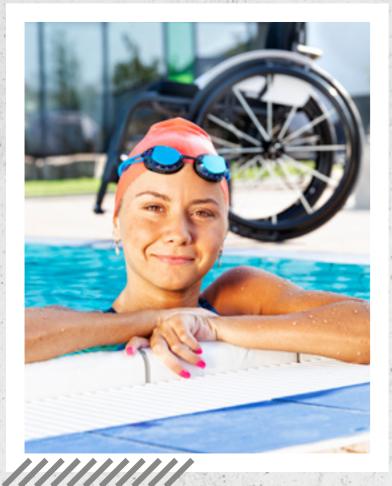

KATARINA DRAGANOV ČORDAŠ

99

MEIN MOTTO: DU LEBST NUR EINMAL 66

menninumuninumuninum



EIN TAG MIT KATARINA

Die 22 Jahre junge Profischwimmerin aus Serbien wohnt mit ihren Eltern in Enns, Österreich. Nach einem Badeunfall 2015 ist sie auf den Rollstuhl angewiesen.

Doch Aufgeben stand für Katarina nie zur Debatte. Sie ist ihrer Leidenschaft – dem Schwimmen – treu geblieben. Vier Mal in der Woche geht sie zum Training.

Ihre positive Ausstrahlung und ansteckende Lebensfreude begeistern. Abseits des Wassers stylt sie sich gerne und auch Shopping gehört zu ihren Hobbys.

Wir haben Katarina einen Tag begleitet und mit ihr viele schöne Stunden erlebt. Immer mit dabei: ihr MEYRA Nano – ein Starrrahmenrollstuhl, der alles mitmacht.



MEYRA NANO – DIE NEUE GENERATION AKTIV-ROLLSTÜHLE

Der Nano ist ein Starrrahmenrollstuhl mit offenem Rahmenkonzept – stylish, sportlich, kompakt. Höchste Stabilität bei geringem Eigengewicht. Angepasst bis ins Detail für einzigartige Fahreigenschaften und Komfort. Die Verladung ist einfach wie nie: Rückenlehne umklappen, steckbare Seitenteile und Antriebsräder demontieren – fertig. Der kompakte Rahmen findet nahezu überall im Auto seinen Platz, sogar im Cabrio!







DEZENT IN SZENE GESETZT

Mit dem offenen Rahmenkonzept bietet der Nano ein besonders klares, reduziertes Design. In puncto Individualität spielt er ganz oben mit: Rahmenfarbe, Seitenteile, Fußstütze und Räder können farblich angepasst werden – so kommt der sportive Charakter noch mehr zur Geltung. Mache den Nano zu deinem einzigartigen Begleiter und verpasse ihm deinen persönlichen Look.







FARBHIGHLIGHTS

Eine Palette vielfältiger Rahmenfarben bietet große Gestaltungsfreiheit. Ob auffällig, neutral oder dezent – es sind keine Grenzen gesetzt. Seitenteile und Fußplatte werden in Rahmenfarbe lackiert, optional lassen sich diese auch in Wunschfarbe realisieren.





LENKRÄDER

Lenklaufräder aus Vollgummi mit Alufelge gibt es optional in Trendfarben von Xtrend. Die Frog Legs sind in silber, schwarz, orange, rot, blau und weiß erhältlich.




ANTRIEBSRÄDER

Neben den Standard Antriebsrädern sind die Xtrends Aktiv Räder in blau, rot und gold erhältlich. Leichtgewicht Magnesium Räder gibt es in den Farben metallicblau, -rot, -orange, schwarz und weiß.



EINFACH MAL ABSCHALTEN UND
SICH TREIBEN LASSEN – DER NANO STEHT MIR SICHER ZUR SEITE!



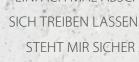



HERVORRAGENDE FAHREIGENSCHAFTEN

Der Nano bietet eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten für die optimale Anpassung an die eigenen Bedürfnisse. Das leichte Handling zeichnet ihn besonders in engen Situationen aus. Der Vorteil des persönlich angepassten Starrrahmens: Wendigkeit und präzises Manövrieren – so erreichst du schnell dein Ziel.



SELBSTBEWUSST UND SICHER

Der Nano ist extrem haltbar und stabil. Eine optimale Wandstärke und eine hochqualitative Lenkradanbindung versprechen einen langlebigen Rollstuhl, dem du uneingeschränkt dein Vertrauen schenken kannst.



Lenkradanbindung

