




DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM

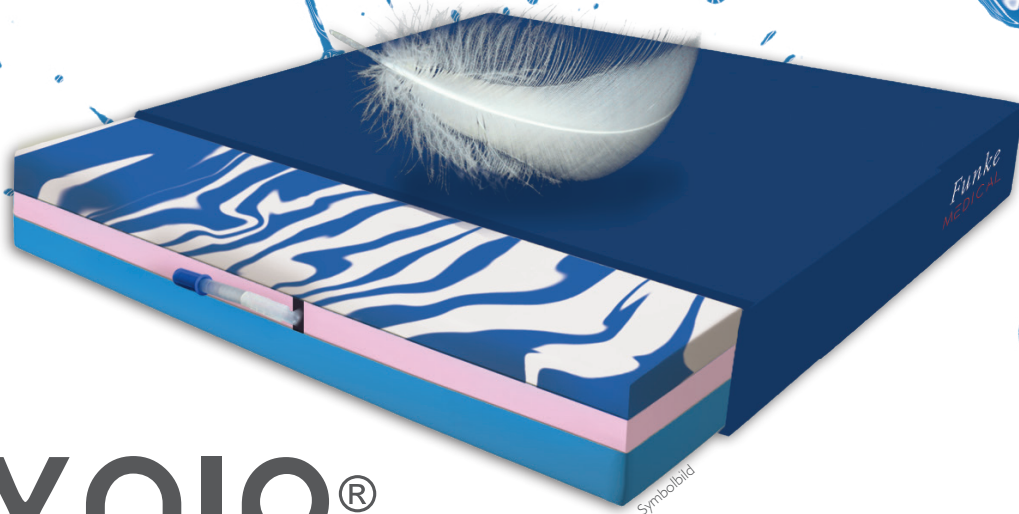

XAIR®
HYBRID

- LUFTZELLEN-SITZKISSEN -
Für aktive Rollstuhlfahrer!

Überreicht durch:



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch



2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
2016: Silver Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
2017: Silver Europameisterschaft (Tenerife, ES)
2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

A. Breuer
Annabel Breuer
Nationalspielerin
Rollstuhlbasketball.



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur
Schmerztherapie

Bis Stadium 4
(nach Prof. Seiler/EPUAP)


Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

HMV-Nr.
11.39.03.9001



Dekubitustherapie-Luftzellen-Sitzkissen

für aktive Rollstuhlfahrer!

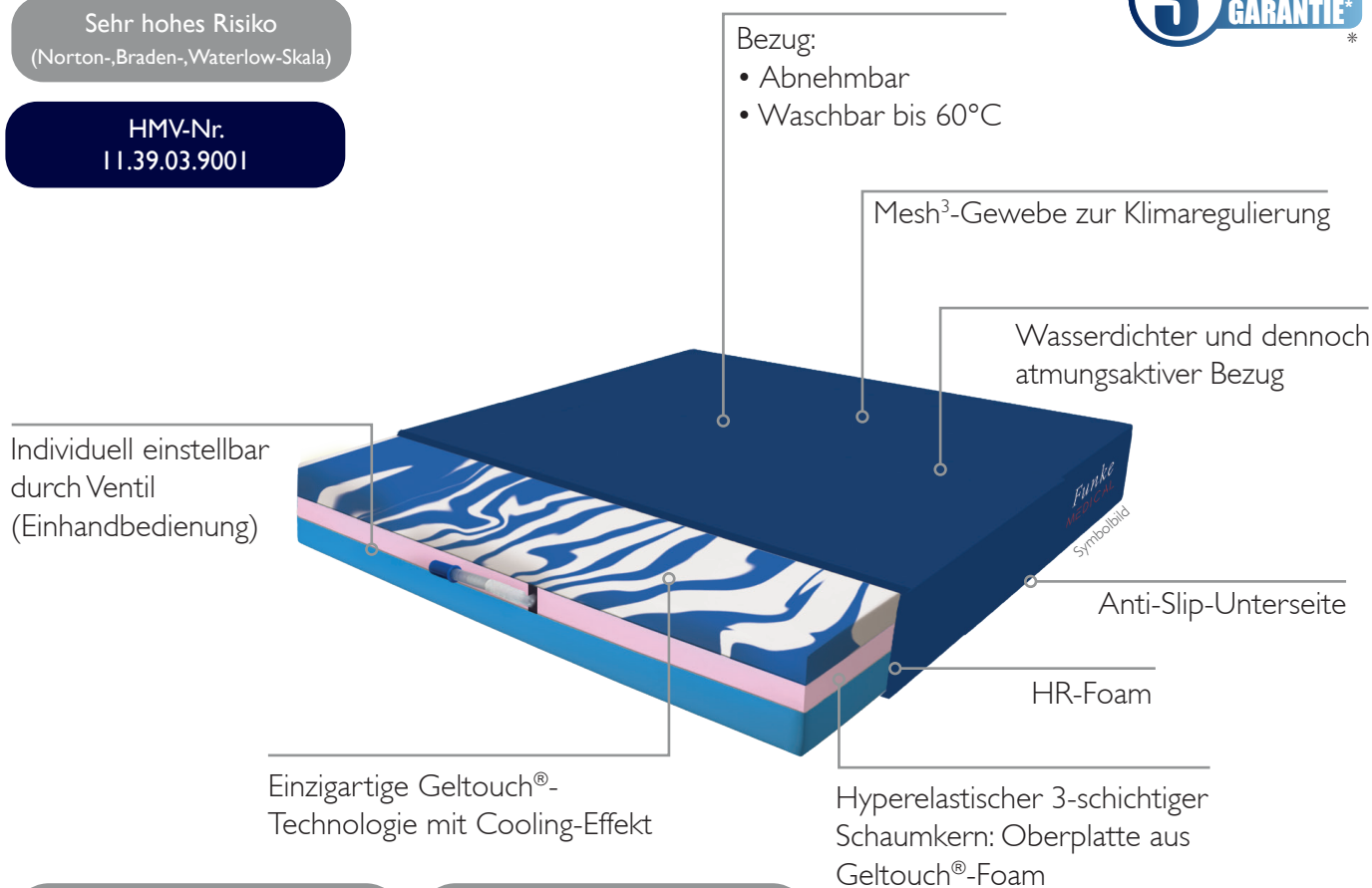

Größe	Art. - Nr.	Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe		Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 8	XAIR3840	45 x 44 x 8	XAIR4544
40 x 40 x 8	XAIR4040	45 x 46 x 8	XAIR4546
40 x 42 x 8	XAIR4042	46 x 51 x 8	XAIR4651
41 x 46 x 8	XAIR4146	48 x 42 x 8	XAIR4842
42 x 40 x 8	XAIR4240	48 x 44 x 8	XAIR4844
42 x 42 x 8	XAIR4242	48 x 46 x 8	XAIR4846
42 x 44 x 8	XAIR4244	50 x 42 x 8	XAIR5042
42 x 46 x 8	XAIR4246	51 x 44 x 8	XAIR5144
42 x 52 x 8	XAIR4252	51 x 46 x 8	XAIR5146
45 x 42 x 8	XAIR4542	52 x 52 x 8	XAIR5252

JETZT ANSEHEN
auf YouTube!




XAIR® hybrid-Film



Offener, atmungsaktiver
Geltouch®-Foam +
HR-Foam +
Visco-Foam



Autoklavierbar

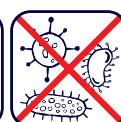


Bezugsmaterial
viren- und
bakterienstark
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht,
dennoch
atmungsaktiv



Optimierte
Druckentlastung

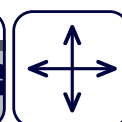

Bi-elastischer Bezug
zur Minimierung
der Scherkräfte



CE - Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (Teil 1+2)
CRIB 5



Patientengewicht:
0 bis 200 kg



Sehr leicht




Griff für den
einfachen Transport

Weiche Schutzabdeckung
mit Klettverschluss




1

Schutzabdeckung nach
oben klappen.

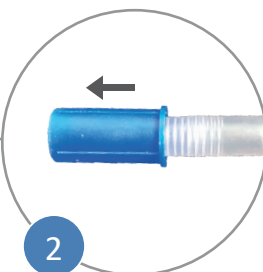

2

Ventil durch Ziehen öffnen und
ca. 30 Sekunden warten, bis sich
die Luftkissen selbstständig
aufgeblasen haben.
(Ventilkappe kann nicht herunterfallen.)

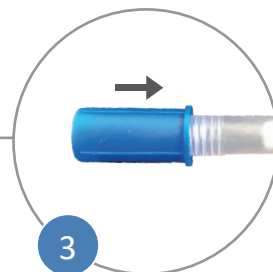


3

Ventil durch
Drücken schließen.




4

Kissen auf die Sitzfläche des
Rollstuhles oder Sitzes legen.
(Der Haltegriff muss nach vorne und die darauf
angebrachten Pfeile müssen nach oben zeigen.)
Auf das Kissen setzen.

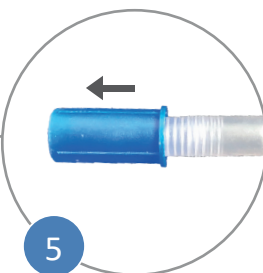



5

Vorsichtig das Ventil
wieder öffnen bis der ideale
Sitzkomfort erreicht ist.

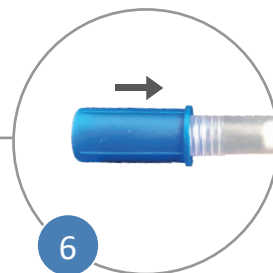

6

Ventil wieder schließen.
Danach die Schutzabdeckung
wieder nach unten klappen.

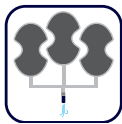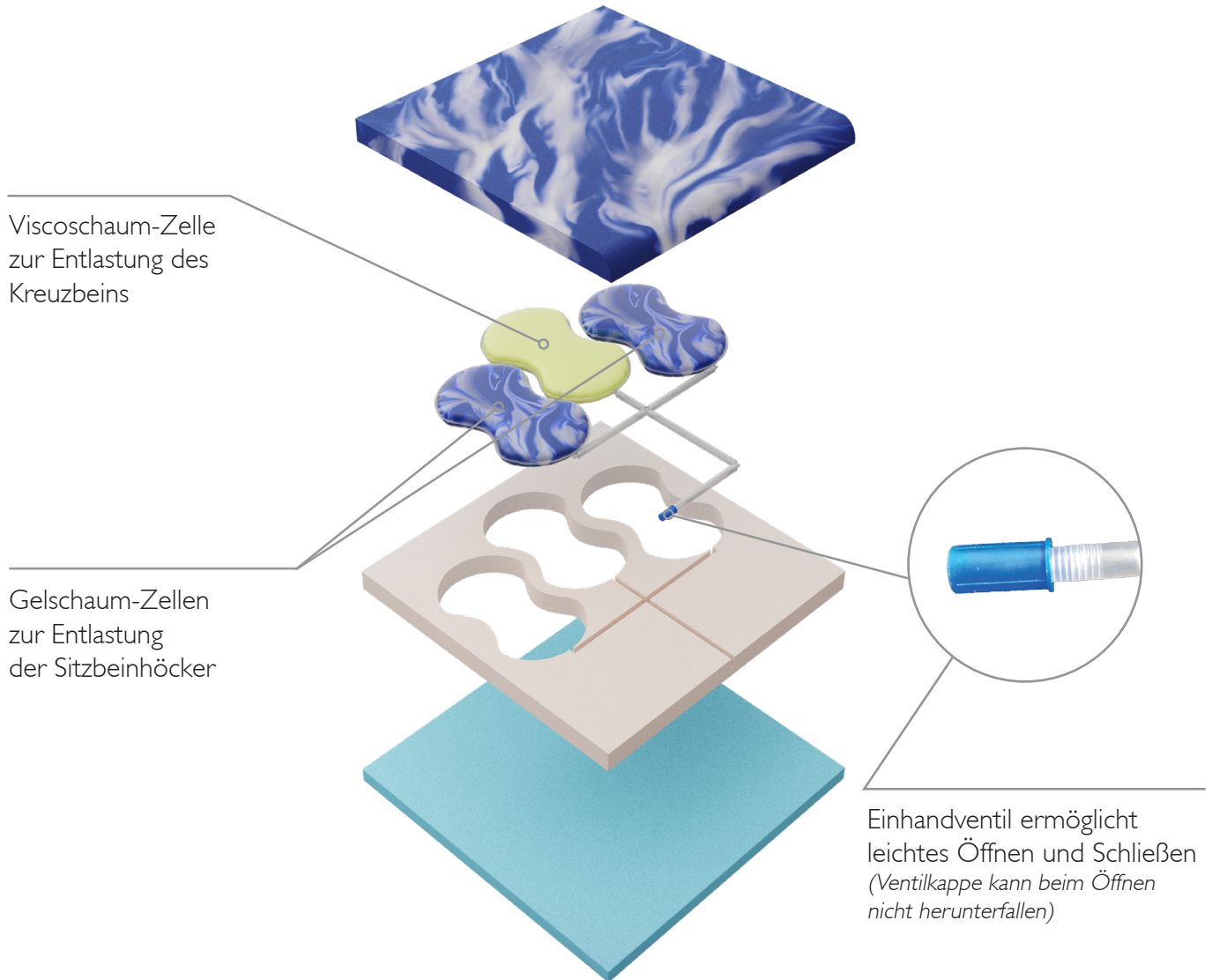

3-Kammer-Sitzkissen sorgt für eine optimale Druckentlastung



Individuell einstellbar für idealen Sitzkomfort



Keine Pumpe oder andere Werkzeuge notwendig



Schnelle und einfache Anpassung an die äußeren Druckverhältnisse



Kein Ausfallrisiko durch selbstaufblasende FOAM-IN-CELL-TECHNOLOGIE



Sehr leicht – 70% weniger Gewicht als herkömmliche Luftzellen-Sitzkissen