

beka
hospitec



EVE!

Der Dusch- und Badelifter vereint einzigartiges, modernes Design und höchste Funktionalität auf perfekte Art und Weise



Produktvideo
ansehen!



Der Kombi-Badelifter für Dusch- und Badevorgänge!

Der einzigartige, moderne EVE! Dusch- und Badelifter ist genau das richtige Hilfsmittel, um jederzeit, abhängig von der Mobilität Ihres Bewohners, in der Lage zu sein Ihre Bewohner sicher und komfortabel zu Duschen oder zu Baden.

Äußerst wendig und leicht zu fahren, kann EVE! flexibel in jeder vorhandenen Pflegebade-
wanne eingesetzt werden. Durch den akkubetriebenen elektrischen Antrieb erfolgt die Hö-
henverstellung stufenlos und sehr leise und somit für den Bewohner ohne Angstgefühle.

Mit der dazugehörigen Handbedienung ist der Lifter durch nur eine Pflegekraft einfach und
sicher zu bedienen. Ein integriertes Servicemodul meldet Störungen am Lifter sowie fällige
Wartungen.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3



Niedrige Einstiegshöhe von 49,5 cm ermöglicht einfachen Selbsteinstieg



Ergonomische Sicherheitslenkgriffe ermöglichen exaktes Manövrieren



Komfortsitz mit Pflegeöffnung



Passt problemlos in jede moderne Pflegebadewanne



Optional: Integrierte Patientenwaage




Hochwertige Aluminium- und Edelstahl-Konstruktion



Leicht fahrbare Doppelrollen, zwei davon bremsbar und feststellbar



Akku und Notaus-Funktion

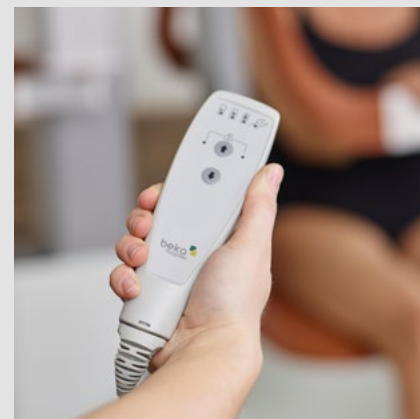

Handbedienung mit Anzeige des Akkuladezustandes



Zu 100% als Duschstuhl & Badelifter verwendbar

EVE! kann dank seiner einfachen Handhabung problemlos von nur einer Pflegekraft bedient werden. Sowohl als Duschstuhl oder als zuverlässiger Badelifter – EVE! ist das universelle Hilfsmittel im Pflegebad.



Komfortsitz mit abnehmbarer PUR-Auflage

Der speziell geformte Sitz weist eine große Hygieneöffnung auf. Die Auflage ist aus hochwertigem PUR Material und kann einfach entfernt, gereinigt und wieder angebracht werden.



Modernes, hochwertiges Design

Komplett aus Edelstahl und Aluminium gefertigt. Mit EVE! haben Sie einen leicht manövrierbaren Badelifter, der durch sein einzigartiges Design überzeugt.



Problemloser Selbsteinstieg

Das Fahrgestell ist so geformt, dass ein problemloser Selbsteinstieg Ihrer (teil-) mobilen Bewohner möglich ist. Die niedrigste Einstiegshöhe beträgt 49,5 cm.



Technische Daten

Gesamtmaß (L x B x H)	950 x 680 x 1.240 mm
Hubhöhe	495 - 1.065 mm
Niedrigste Einstiegshöhe	495 mm
SWL	185 kg
Doppelrollen (Hinten mit Bremse und Feststeller)	100 mm Durchmesser

Produkteigenschaften

Hochwertige Aluminium- und Edelstahl-Konstruktion
Elektrisch höhenverstellbar
Komfortsitz mit Hygieneöffnung
Not-Aus-Funktion
Geschlossene Doppelrollen
Ergonomische Sicherheits-Lenkgriffe
Kabelfernbedienung mit Anzeige des Akkuladezustandes

Verfügbare Optionen



Ersatzakku 24 V



Wandladegerät



Digitale Patientenwaage



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch

BEKA Hospitec GmbH

Am Rübenmorgen 3
35582 Wetzlar-Dutenhofen
info@beka-hospitec.de



Fon +49 641 922 20-0



Fax +49 641 922 20-20



www.beka-hospitec.com