

Positionierungshilfen

Fersenfreilagerungsschuh

Der Heel Protect® schützt dort, wo es am meisten zählt – er gewährleistet eine Freilagerung der Ferse, sorgt für Stabilität, beugt einem Spitzfuß vor und verhindert ein seitliches Wegdrehen des Fußes. Für mehr Komfort und Sicherheit.





HEELPROTECT®

Fersenfreilagerungsschuh

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Geeignet zur Therapie des diabetischen Fußes
- Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Der Heel Protect® Fersenfreilagerungsschuh kann zur stabilen Positionierung des Fußes genutzt werden. Die Ferse kann in der Aussparung frei gelagert werden. Mit dem Klettverschluss kann der Fuß in einer 90°-Position gehalten werden, was zur Spitzfußprophylaxe beiträgt. Der Rotation-Stop verhindert ein seitliches Wegdrehen des Fußes.

Eigenschaften PU-Bezug

- Abnehmbar, waschbar bis 95°C, trocknergeeignet, autoklavierbar, wischdesinfizierbar, desinfektionsmittelbeständig


Besonderheiten

- Klettverschluss zur Spitzfußprophylaxe
- Mesh³-Gewebe für maximalen Tragekomfort und Klimaregulierung
- Einzigartige Geltouch®-Technologie mit Cooling-Effekt
- Rotation-Stop

Technische Daten

- Offenporiger atmungsaktiver Schaum
- Autoklavierbar
- Optimierte Druckentlastung
- Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte
- Medizinprodukt nach der MDR
- Einheitsgröße

Zur Bildanleitung

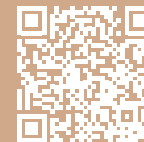

[funke-medical.de/
bildanleitung/heel-protect.pdf](https://funke-medical.de/bildanleitung/heel-protect.pdf)

Größe

One size fits all

