



Niederflur-Pflegebett FloorBed® 2

Qualität verbindet – Werte entscheiden.

HMV: 19.40.01.5004 / 50.45.01.5004

Die Reduzierung des Fallrisikos aus dem Bett und die Vermeidung der damit verbundenen Verletzungen haben höchste Priorität bei der Pflege.

Die innovative Konstruktion des FloorBed® 2 verbessert die Lebensqualität des Nutzers und trägt zur Entlastung der Pflegekräfte bei. Die Kosten für die Pflege des Nutzers werden gesenkt.

- FloorBed® 2 reduziert das Fallrisiko aus dem Bett und damit verbundene Verletzungen
- Das Weglassen der Seitengitter führt zu einer verminderten Angst durch Bedrängung und zu vermindertem Agieren des Patienten
- Erhöhung der Arbeitssicherheit


Die Arbeitshöhe der Liegefläche kann für größere Pfleger bis zu einer Höhe von 80,0 cm eingestellt werden.

Bei komplett ausgefahrener Höhe beträgt die Höhe des Kopf- und Fußteils 110,0 cm. Das ermöglicht einen einfachen Zugang bei der Pflege des Nutzers, wie Haare waschen oder Ankleiden der Füße oder die Korrektur der Lage zum Kopf- oder Fußende hin.

In der untersten Einstellung ist die Liegefläche des FloorBed® 2 nur 7,1 cm hoch. Das entspricht der Höhe eines Tennisballs. So werden schwere Verletzungen bei einem eventuellen Herausfallen aus dem Bett auf ein Minimum reduziert.



*FloorBed® 2 mit der niedrigsten Einstellung der Liegefläche
(Matratze nicht im Lieferumfang enthalten)*

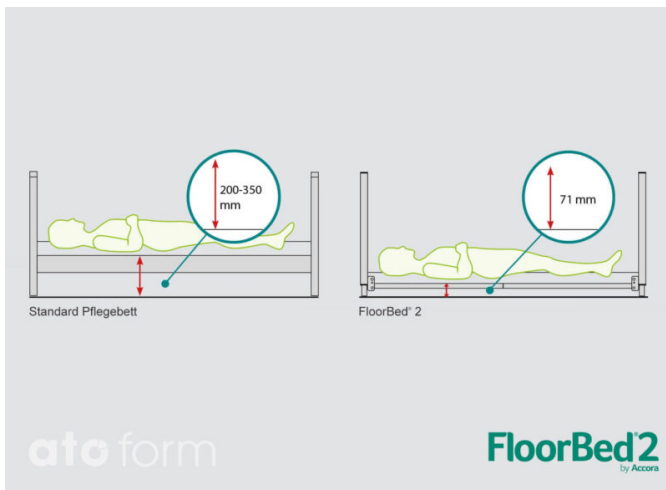

Vergleich der niedrigsten Höhe: Standard Pflegebett – Floorbed® 2



Floorbed® 2 – optimale Einstellung der Höhe für die Pflege des Nutzers


Einsatzgebiete für das FloorBed® 2

- Sturzgefahr aus dem Bett
- Bei unkontrollierten Bewegungen
- Probleme beim Anheben der Beine oder beim Transfer aus dem Bett

Verletzungsrisiken beim Herausfallen aus dem Bett

Bett

- Kopfverletzungen
- Halswirbelfraktur
- Ober- bzw. Unterarmfraktur
- Geprellte oder gebrochene Hüfte
- Geprellte oder gebrochene Beine

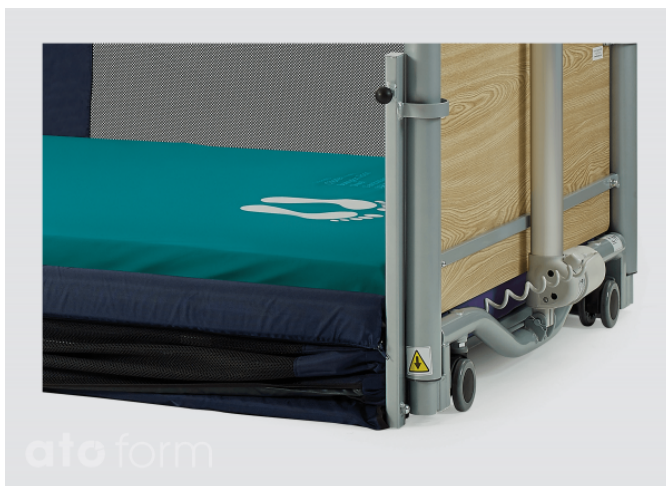

Einzel feststellbare Rollen – unter dem Rahmen verborgen



Die Höhe der Matratzenauflage beträgt gerade mal 7,1 cm



ato form

Breitenverstellbare Matratzensicherung



ato form

Keine eventuell störenden, durchhängenden Kabel unterhalb der Matratzenauflage

Vorteile der Niedrigstellungsfunktion

Reduzierung der Verletzungsgefahr durch Herausfallen aus dem Bett

Die extrem niedrige Höhe der Matratzenauflage reduziert das Fall- und das Verletzungsrisiko.

Keine Notwendigkeit von Seitengittern

Durch geringe Fallhöhe kann der Bedarf an Seitengittern reduziert werden oder entfallen. Das ist insbesondere für Nutzer wichtig, die durch den Einsatz von Seitengittern verletzungsgefährdet sind.

Kein Verletzungsrisiko durch Seitengitter

Verringerung der Einklemmgefahr oder Verletzung durch unkontrollierte Bewegungen des Pflegebedürftigen und keine Erhöhung der potentiellen Fallhöhe durch den Einsatz von Seitengittern.

Reduzierung von Agitationen

Bei dem Einsatz von Seitengittern kann der Nutzer unruhig sein oder sich bedrängt fühlen. Das kann dazu führen, dass die pflegebedürftige Person sich dagegen wehrt und versucht über die Seitengitter zu klettern oder andere Verhaltensprobleme aufweist.

Unabhängiger Transfer

Die einstellbare Betthöhe ermöglicht es dem Pflegebedürftigen, beim Verlassen des Betts die Füße flach auf dem Boden zu platzieren, wenn er auf der Bettkante sitzt. Das Risiko eines Ausrutschens wird reduziert. Insbesondere schwächere Nutzer bekommen so die Möglichkeit sich unabhängig aus dem Bett zu bewegen. Gegebenenfalls kann so der Bedarf an Aufstehhilfen oder Pflegepersonal reduziert werden.

Unabhängiger Transfer in's Bett

Nutzer mit Einschränkungen der Beweglichkeit in der Hüfte oder den unteren Gliedmaßen können von der niedrigen Einstellung des Bettes profitieren, indem sie die Beine unabhängig voneinander in's Bett heben können. Unter Umständen kann das den Bedarf an Liftern oder Pflegepersonal reduzieren.

Vorteile der Bettfunktionen

Optimale Einstellung der Höhe

Das FloorBed® 2 lässt sich auf eine optimale und sichere Höhe für jede Pflegesituation einstellen

Kompatibel mit den meisten Matratzen

Die Matratzenauflage hat eine Standardgröße von 200 x 90 cm und ist kompatibel mit den meisten gängigen Bettenmatratzen.

Keine störenden Kabel

Die Kabel sind sicher an der Unterseite der Matratzenauflage fixiert. Das reduziert das Risiko von Defekten und ermöglicht eine sichere Nutzung der Höheneinstellung.

Höhe der Rückenlehne



- Mehr Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit für den Nutzer
- Unterstützt beim Transfer
- Aufgerichtete Position des Nutzers bietet einfacheren Blickkontakt und somit bessere Integration
- Verbesserung der Hand-/Armkoordination. Die pflegebedürftige Person kann selbstständig essen oder andere Aufgaben unabhängig durchführen.

Verstellung Ober- und Unterschenkelauflage

Sicherung der Position im Bett. Reduzierung von Schwellungen in den Beinen, Verbesserung des Kreislaufs, Entspannung durch Hochlagerung der Beine.

Bettverlängerung

Das FloorBed®2 kann mit einem Extension-Kit um 10 oder 20 cm verlängert werden.

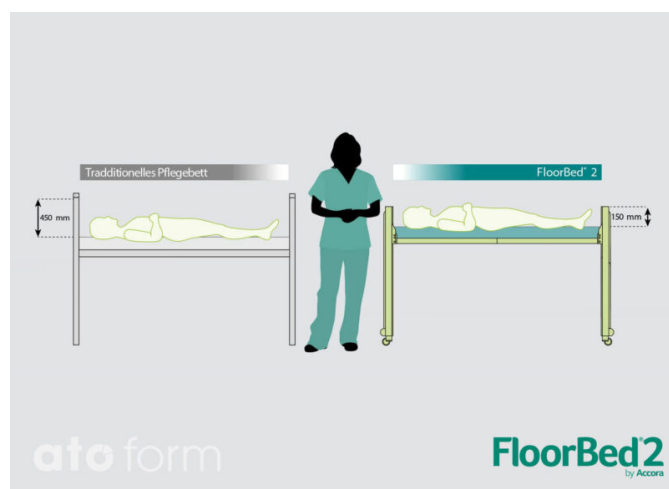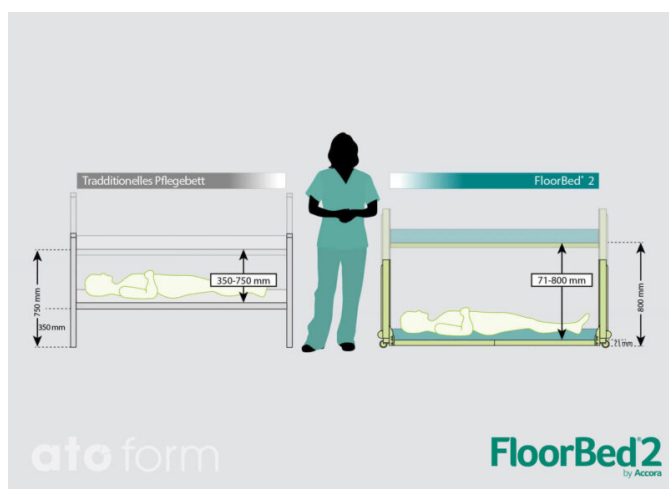

Technische Daten

FloorBed® 2	
Artikelnummer	FL2-200
Gesamtlänge	228,5 cm
Gesamtbreite	93,5 cm
Rollen mit Feststellbremsen	4 x 75 mm
Länge Liegefläche (Matratzenauflage)	200,0 cm
Breite Liegefläche (Matratzenauflage)	90,0 cm
Höhenverstellung elektrisch	7,1 bis 80,0 cm
Neigungsverstellung	+/- 15 Grad
Schutzart	IPX4
Geräuschpegel	< 60 dBA
Maximale Belastbarkeit	185,0 kg
Maximales Patientengewicht	150,0 kg
Produktgewicht (inklusive Transportkit)	93,2 kg


Funktionen der Liegefläche



- Elektrisch neigungsverstellbare Rückenlehne mit automatischem Rückenlehnenrückzug
- Elektrische Verstellung der Liegefläche mit Kniegelenk
- Elektrische Einstellung der Liegefläche in Trendelenburg- und Antitrendelenburg Position +/- 15 Grad

Zubehör

.fusion-portfolio-wrapper#fusion-portfolio-1 .fusion-portfolio-content{ padding: 25px 25px 25px 25px; text-align: left; }
.fusion-portfolio-1 .fusion-portfolio-wrapper .fusion-col-spacing{padding:5px;}

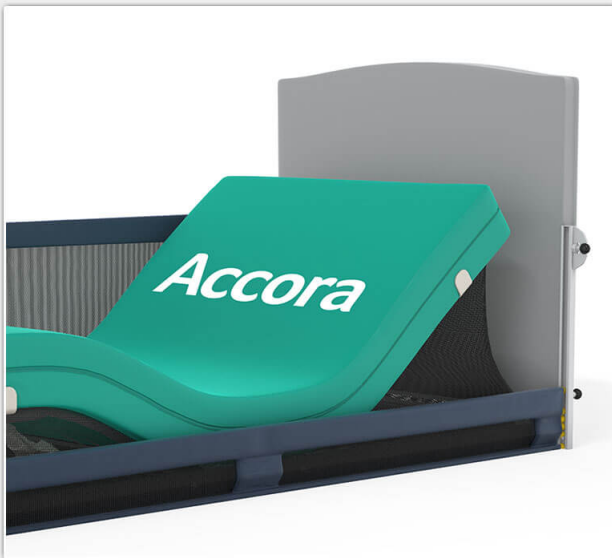

JuniorBed Umrüstsatz für Floorbed 1 und 2

Der Umrüstsatz für die Niederflurbetten von Accora setzt sich zusammen aus einem Aufprallschutz für Kopf und Fußende, einer Schutzauflage, Seitengitter aus flexiblem Material und Schutzplatten

[Erfahren Sie mehr](#)



Seitengitter aus flexiblem Material, inkl. Montagebeschlag



Sturzmatte klappbar



Aufprallschutz für Kopf- und Fußende



Schutzauflage



Haltegriff fürs Bett



Drehbarer Haltegriff



Bettgalgen



Transportkit mit Rollen



Verlängerungsmodul für das Bett