



Sitzkissen

Antidekubitus-Sitzkissen

Ob im Rollstuhl, am Arbeitsplatz oder zu Hause – unsere Sitzkissen sind zuverlässige Begleiter. Sie bieten Entlastung, fördern das Wohlbefinden und sorgen für eine stabile Sitzposition. Unsere Sitzkissen fördern eine gesunde, druckentlastende Sitzposition und passen sich individuell an Deine Bedürfnisse an – für mehr Komfort, Stabilität und Freiheit im Alltag. Ob aktiv unterwegs oder mit besonderen Anforderungen – finde das Modell, das Dich optimal unterstützt.

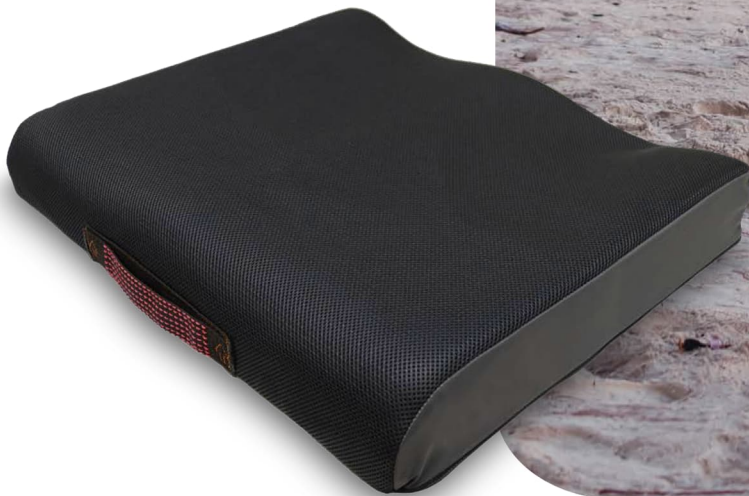

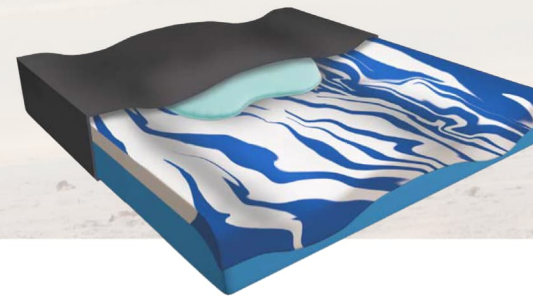

GEL SEAT®

Antidekubitus-Sitzkissen

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Einsetzbar bis Grad 4 (nach Prof. Seiler/EPUAP)
- Sehr hohes Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Das GELSEAT® ist ein zweischichtig aufgebautes Antidekubitus-Sitzkissen, das zur Druckentlastung beiträgt. Die obere Schicht besteht aus Geltouch®-Schaum, welcher einen Cooling-Effekt bietet. Das integrierte Gelpad trägt zur Stoßdämpfung der Sitzbeinhöcker bei. Dank des speziellen Bodyshape-Designs unterstützt das Kissen eine korrekte Sitzposition.



Eigenschaften Mesh-Bezug

- Abnehmbar, waschbar bis 60°C
- Ultraschallverschweißte Nähte an der Oberseite
- Mesh³-Gewebe zur Klimaregulierung

Besonderheiten

- Oberplatte aus Geltouch®-Schaum
- Anatomischer Bodyshape gewährleistet eine ideale Sitzposition
- Gelpad: Optimal zentriert zur maximalen Entlastung der Sitzbeinhöcker, zur Stoßdämpfung, Verminderung der Scherkräfte
- Einzigartiger Geltouch®-Schaum mit Cooling-Effekt
- Anti-Slip-Unterseite
- Praktischer Tragegriff

Technische Daten

- Offenporiger atmungsaktiver Schaum
- Autoklavierbar
- Wasserdicht dennoch atmungsaktiv
- Optimale Druckentlastung
- Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte
- Medizinprodukt nach der MDR
- Wartungsfrei
- Patientengewicht: 20-120 kg

