

## DRUCKENTLASTUNG IM HOCHRISIKOBEREICH

**DEKUBITUS BEHANDLUNGSPLAN**

**100% ATMUNGSAKTIV**

**KOMPAKTE FORM**

**MASCHINEN WASCHBAR**

**GEBRAUCHSFERTIG**

- ▲ Zur vollständigen Entlastung des Rektalbereichs
- ▲ Anpassbarer kontaktloser Bereich
- ▲ Stabile Positionierung


Das Vicair Centre Relief 02 besteht aus 5 einzelnen Kammern, die sich unter Belastung anpassen. Jede Kammer ist für einen bestimmten Bereich des Beckens ausgelegt, was ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Haut und des tiefer liegenden Gewebes an Ischias, Sitzbein und Trochanter bietet, für eine Positionierung des Beckens sorgt und die Oberschenkelknochen stützt. Einzigartig ist die runde Kammer im hinteren Bereich des Kissens. Diese wurde speziell für die (teilweise) Entlastung des Sitzbein-/Rektalbereichs entwickelt. Je nach Bedarf kann die Füllung der 5 Kammern einfach angepasst werden für Personen, die: (1) spezielle (teilweise) Entlastung des Rektalbereichs benötigen, (2) Probleme mit dem Sitzbein haben oder (3) lokale tiefe Druckverletzungen aufweisen.

**ERHÄLTICHE BEZÜGE**  
 Vicair 02 Top Cover, Comfair Cover und Incotec Cover.

PRODUKTLEISTUNG	
<b>Hautschutz / Anti-Dekubitus</b>	
Druckverteilung	▲▲▲▲▲
Reduzierung der Scherkraft	▲▲▲▲△
Mikroklimakontrolle	▲▲▲▲▲
Stoss- & Vibrationsdämpfung	▲▲▲▲▲
<b>Positionierung</b>	
Laterale Stabilität	▲▲▲▲△
Frontale Stabilität	▲▲▲▲▲
Verringerung der Rutschgefahr	▲▲▲△△
Ermöglicht manuelle Anpassungen	▲▲▲▲▲
Steigerung der Ausdauer	▲▲▲▲△
<b>Wartung &amp; Sicherheit</b>	
Langlebigkeit	▲▲▲▲▲
Zuverlässigkeit	▲▲▲▲▲
Funktionalität bei Missbrauch	▲▲▲△△
Pflegeleicht	▲▲▲▲▲
Hygienelevel	▲▲▲▲▲
<b>Funktionalität &amp; Anwendung</b>	
Komfort	▲▲▲▲▲
Ultraleichtes Gewicht	▲▲▲▲▲
Erlaubt einfache Transfers	▲▲▲△△
Erhältliche Standardgrößen	▲▲▲▲△
Maximales Nutzergewicht	▲▲▲▲△

TECHNISCHE ANGABEN	
Dicke	10 cm
Durchschnittliches Gewicht	750 Gramm
Max. Nutzergewicht	250 kg
Maschinenwaschbar	max. 60°C

KISSENGRÖSSEN	
■ Standard	
■ Auf Anfrage	

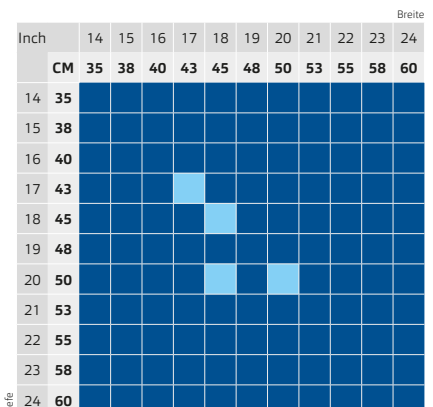

070069-OCR-DE-REV01/2022