



AMALIA 2

Medizinische Pflege-
und Bettleuchte



Ergonomie in ihrer schönsten Form – für spürbares Wohlbefinden

Die neue Pflege- und Bettleuchte vereint ergonomisches Design mit einem homogen ausgeleuchteten Lichtfeld und einer im Schirm integrierten Optik zur präzisen Lichtlenkung. Sie wurde nachhaltig entwickelt und besteht aus robusten, langlebigen Materialien. Ihre geschlossene Bauform ermöglicht eine einfache und hygienische Reinigung. Die stufenlose Dimmung per Tastendruck und der frei drehbare Leuchtenkopf mit flexiblem Schwanenhals sorgen für spürbar mehr Komfort.

Hochwertig hygienisch

Robuste Materialien und geschlossene Bauform ermöglichen ein einfaches Reinigen.



Ambientelicht

Bei minimaler Dimmung und zur Decke ausgerichtet, erzeugt die Leuchte ein angenehmes, indirektes Licht für eine entspannte Atmosphäre.

Einzigartige Positionierung

Höchster Komfort dank 360° frei drehbarem Leuchtenkopf und robustem Schwanenhals. Die grenzenlose Drehbarkeit minimiert Angriffsflächen für Krafteinwirkungen am Kopf und verleiht der Leuchte eine aussergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit.

Individuell einsetzbar

Ideal als Bettleuchte in Pflegeeinrichtungen und Kliniken, auch für kleinere Untersuchungen am Krankenbett einsetzbar.



Homogenes Lichtfeld

Einzigartige Optik, direkt im Schirm integriert, fokussiert das Licht an die gewünschte Stelle.

Dimmbar

Einfaches Dimmen durch Halten des Ein-/Ausschalters.



Findelicht

Der beleuchtete Ein- und Ausschalter kann auch im Dunkeln einfach bedient werden.

Zertifizierte Pflege- und Bettleuchte nach neuester medizinischer Norm

Die AMALIA 2 ist für den medizinischen Bereich geeignet und dank ihrer Medizinzulassung problemlos in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern einsetzbar. Das integrierte Weitspannungsmodul ermöglicht zudem die einfache Anbindung an Bettenmotoren.

AMALIA 2 P S7

Pinversion mit zweifachem Schwanenhals



AMALIA 2 B S8

Universalbettenadapter und zweifachem Schwanenhals



AMALIA 2	Technische Daten
Beleuchtungsstärke	1 200 Lux à 0.5 m *
Farbtemperatur	3 000 K *
Beleuchtungsfeld (D10)	Ø 45 cm à 0.5 m *
Farbwiedergabe CRI (Ra)	96
Leuchtengehäuse	Kunststoff (PBT)
Leistungsaufnahme	< 3 W
Lichtstrom	180 lm *
Gelenkentlastung	Reibung
Schutzklasse	II
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Dimmbar, Drehdurchführung (360° Turnoverachse), Fintelicht, Netzschalterstart konfigurierbar, Weitspannungsmodul (12V-30V)

* -10% / +20% Toleranz



Firmensitz

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Schweiz
+41 71 388 11 66
mailbox@derungs.swiss
www.derungs.swiss

Beratung & Vertrieb

Deutschland

Derungs Medical GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 2
78239 Rielasingen-Worblingen
Deutschland
Tel. +49 7731 90 97 19-0
info@derungsmedical.com

Frankreich

Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l'Embranchement
67116 Reichstett
Frankreich
Tel. +33 3 88 20 95 88
info-fr@waldmann.com

Italien

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Italien
Tel. +39 02 98 24 90 24
Fax +39 02 98 24 63 78
info-it@waldmann.com

Niederlande

Waldmann BV
De Ooyen 25,
4191 PB Geldermalsen,
Niederlande
Tel. +31 344 631019
info-nl@waldmann.com

Österreich

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 Pasching/Linz
Österreich
Tel. +43 7229 67400
Fax +43 7229 67444
info-at@waldmann.com

Skandinavien

Waldmann Ljusteknik AB
Botvid Business Center
Fågelveiksvägen 9
SE-145 53 Norsborg
Schweden
Tel. +46 8 990 350
Fax +46 8 991 609
info-se@waldmann.com

Schweiz


Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 Küttigen
Schweiz
Tel. +41 62 839 1212
Fax +41 62 839 1299
info-ch@waldmann.com

USA

Waldmann Lighting Company
9 W. Century Drive
Wheeling, Illinois 60090
USA
Tel. +1 847 520 1060
Fax +1 847 520 1730
waldmann@waldmannlighting.com


China

Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
Shanghai, P.R.C. 200949
China
Tel. +86 21 5169 1799
Fax +86 21 3385 0032
info-cn@waldmann.com

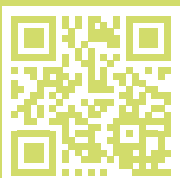

Die Derungs Licht AG
ist ein Unternehmen
der Waldmann Group

www.derungs.swiss

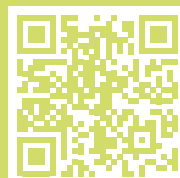

Registrieren und profitieren:
+ 1 Jahr Garantie und
exklusive Angebote

www.derungs.swiss/product-registration