




HYPER FOAM 2 clinic

Greenline Antidekubitus-Matratze

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Einsetzbar bis Grad 4 (nach Prof. Seiler/EPUAP)
- Sehr hohes Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Die Hyper Foam 2 clinic Greenline ist eine Antidekubitus-Matratze mit dreischichtigem Schaumkern für eine hervorragende Druckentlastung. Gefertigt aus nachhaltigem Ecolast®-Schaum, verursacht sie in der Herstellung weniger CO₂ als herkömmliche Weichlagerungsmatratzen aus Schaumstoff. Die offenporige Struktur sorgt für ein optimales Mikroklima. Durch seine besonderen Eigenschaften erreicht der PU-Bezug höchste Hygienestandards und eignet sich für den Gebrauch in Kliniken.

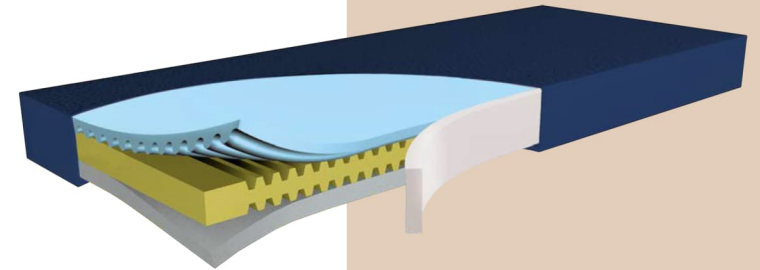

Eigenschaften PU-Bezug

- Abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, desinfektionsmittelbeständig, zur Desinfektion mit Chlor geeignet
- Wasserdampfdurchlässiger Inkontinenzbezug

Besonderheiten

- Supersoft-Zone zur Kopf- und Fersenentlastung
- Quer- und Längsschnitte
- Lüftungskanäle für optimales Mikroklima
- Randzonenverstärkung
- Reißverschlussüberdeckung
- Ultraschallverschweißte Nähte

Größe

(Breite x Länge x Höhe)
90 x 200 x 15 cm



Technische Daten

- Offenporiger atmungsaktiver Schaum
- Autoklavierbar
- Wasserdicht dennoch atmungsaktiv
- Optimale Druckentlastung
- Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte
- Medizinprodukt nach der MDR
- Wartungsfrei
- Patientengewicht: 0-150 kg