



ACTIVE

Adaptiv-, Aktivrollstühle und Optionen

AVANTI 1.736

HMV-Nr. 18.50.03.0160
HMV-Nr. 18.50.03.1067
(Rahmen kurz Code 351)


NUTZERPROFIL

- ✓ Geeignet für Personen mit Restgeh- und Stehfähigkeit
- ✓ Gut einsetzbar bei geriatrischen und neurologischen Krankheitsverläufen
- ✓ Für den Einsatz zu Hause, bei der Arbeit und in der Freizeit
- ✓ Bedarfsgerechte Sitzhöhenverstellung bis hin zu Hemiplegiebedarf

VIELSEITIG ANPASSBARER FALTROLLSTUHL

Der AVANTI begleitet aktiv durch den Alltag und ermöglicht selbstständige Mobilität. Wirtschaftlich und mobil bietet der Adaptiv-Rollstuhl eine gute Alternative bei vielfältigen Aktivitäten. Dank der umfangreichen Anpass- und Ausstattungsmöglichkeiten passt sich der AVANTI an die persönlichen Bedürfnisse an. Durch die Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten verfügt der AVANTI über ein breites Spektrum an Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör.

- Feinstufige Anpassungsmöglichkeiten, serienmäßiger Anpassrücken
- Druck- oder Trommelbremse mit extrem geringer Betätigungskraft
- Seitenteilbremse im Kleiderschutz integriert, siehe AVANTI PRO (optional)
- Mit Radgrößen 22" und 24" können Sitzhöhen vorne zwischen 425 – 560 mm und hinten zwischen 400 – 520 mm eingestellt werden
- 4 Rahmenlängen
- Perfekt angepasster Rahmen für die Sitztiefen 380 mm und 400 mm

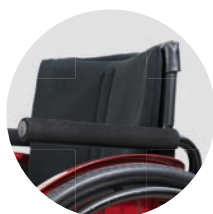

Seitenteilbügel, abschwengbar (optional)



Perfekt angepasst durch die Exzenter-Steuerkopf-Verstellung



Höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung (optional)



Sehr schmales Faltmaß: Breite ab 280 mm; Höhe ab 470 mm (kurzer Rahmen)



Teleskopier- und winkleinstellbare Rücken- höhe. Rückenhöhen von 340 - 440 mm

Max. 6° Sitzwinkelneigung

NEU: Nachspannbarer Sitzbezug serien- mäßig

Gerader Vorderbau mit einzeln abschweng- baren und abnehmbaren Beinstützen (fronta- ler Transfer einfach möglich)

Achse des Antriebsrades in 4 horizontalen und 9 vertikalen Positionen anpassbar, 3°-Radsturz (optional)

Wendigkeit bei geringerem Kraftaufwand



Verstärkte Ausführung bis 160 kg und bis Sitzbreite 580 mm



Niedrige Sitzhöhe ab 370 mm, Sitztiefe ab 330 – 530 mm



4 Rahmenlängen für ein nahezu perfektes Ver- hältnis Rahmen- länge zu Sitztiefe

