



NANO X

# DESIGN YOUR FREEDOM



**ABB.:**  
**NANO X**  
AB SEITE 29

Die innovative Doppelkreuzstrebe in Sandwichbauweise bietet beste Falt- und Fahrperformance. Selbst unwegsames Gelände stellt den Faltrollstuhl NANO X vor keine Herausforderung, denn diese Bauweise macht ihn enorm stabil bei geringem Gewicht.

# NANO X 1.156

HMV-Nr. 18.50.03.0254

## DER STYLISCHE, LEICHTE FALTROLLSTUHL MIT EINZIGARTIGER, INNOVATIVER FALTTECHNIK

Der NANO X vereint Design, Funktionalität und perfektes Fahrverhalten in einem. Die Weiterentwicklung des designaffinen Starrahmenrollstuhls NANO überzeugt mit seiner Faltschichtbauweise. Das Faltsystem garantiert einfaches, intuitives Handling in jeder Situation. Kompakt und platzsparend findet der NANO X überall seinen Platz. Der NANO X fährt sich so stabil wie ein Starrahmenrollstuhl, ist aber ein Faltschichtstuhl!

### NUTZERPROFIL

- ✓ Dauer- und Langzeitversorgungen
- ✓ Querschnittversorgungen
- ✓ Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerere Betroffene
- ✓ Nutzer ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)



Schmales Faltsmaß: Breite 320 mm bei 0° bzw. 370 mm bei 3° Radsturz; Höhe ab 610 mm




Einzelfußplatten in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar (optional)



Varioelement zur Verstellung der hinteren Sitzhöhe und des Schwerpunktes



Extrem flache Doppelkreuzstrebe in Sandwichbauweise für ein starrahmenähnliches Fahrverhalten

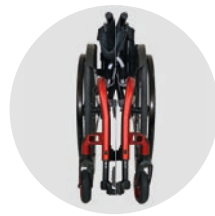

Sicherer Stand und beste Verladeperformance durch rechten Winkel





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# NANO X DESIGN YOUR FREEDOM



Weitere Infos:  
[www.meyra.de/nano-x](http://www.meyra.de/nano-x)



**Der NANO X** mit intuitiv bedienbarem Faltsystem garantiert einfaches Handling in jeder Situation. Kompakt und platzsparend findet der Faltrollstuhl überall seinen Platz, wenn er gerade nicht im Einsatz ist.



# NANO X

## 1.156

HMV-Nr. 18.50.03.0254

### PRODUKTVORTEILE UND OPTIONEN

- Hochwertiges 7020-T6 Aluminium
- Perfektes Verhältnis zwischen Gewicht und Haltbarkeit
- Modern, dank offenem Rahmenkonzept und zahlreichen Farbvariationen
- Schnelle Anpassungsmöglichkeiten durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Servicefreundlich und wartungsarm
- Für den Wiedereinsatz perfekt geeignet
- Intuitives Montagekonzept mit einem riesigen Einstellbereich
- Passend für herkömmliche Verladesysteme



**Elena Stiefelhagen** leidet seit einem Beinbruch unter dem Complex Regional Pain Syndrom kurz CRPS, einem dauerhaften Schmerz im linken Bein. Trotzdem ist sie aktiv und lässt sich nicht unterkriegen. Der NANO X sorgt für die nötige Entlastung.



Seitenteile aus Carbon erhältlich

10 Rahmenfarben wählbar

Neben Standard Aluminium Antriebsrädern sind Aktiv- sowie Spinergy- und Leichtgewichtsräder erhältlich

Lenkradanbindung aus Vollmaterial geätzt und verschweißt

Lenklaufräder aus Vollgummi mit Alufelge, optional in Trendfarben



**Nutzer-  
gewicht**  
bis 130 kg



**Rollstuhl-  
Leergewicht**  
ab 9 kg



**Schmales falt-  
maß, Schmalste  
Gesamtbreite**  
380 – 440 mm