


Sitzkissen Luftzellen-Sitzkissen

Durch die Kombination aus Schaumstoff und Luftzellen wird eine individuelle Einstellbarkeit des Sitzkomforts ermöglicht. Bei der Air-Cell-Technik handelt es sich um eine in Schaumstoff eingebettete Luftzellentechnik, die ohne externe Pumpen oder Strom funktioniert. Die Besonderheit liegt in der einfachen Bedienung, der Wartungsfreiheit und der Möglichkeit für den Nutzer, den Komfort individuell anzupassen.



Zur Bildanleitung

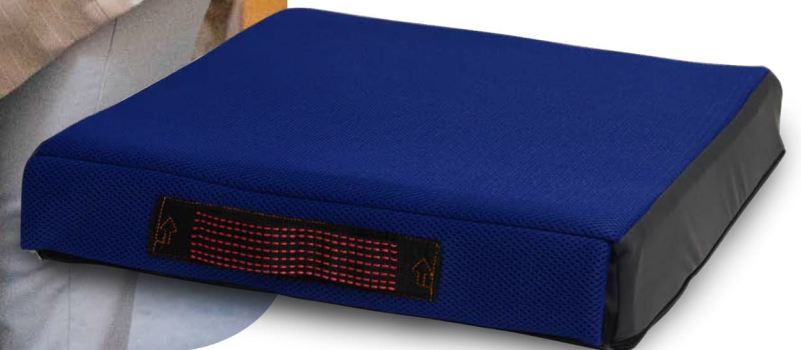

funke-medical.de/
bildanleitung/xair-hybrid.pdf




XAIR[®] hybrid

Antidekubitus-Luftzellensitzkissen

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Einsetzbar bis Grad 4 (nach Prof. Seiler/EPUAP)
- Sehr hohes Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)



Das XAIR[®] hybrid ist ein Antidekubitus-Luftzellensitzkissen, das zur Druckentlastung beiträgt. Es verfügt über drei mit Schaum gefüllte Luftzellen, wodurch der Sitzkomfort individuell über ein Ventil eingestellt werden kann. Es wird keine Pumpe benötigt.

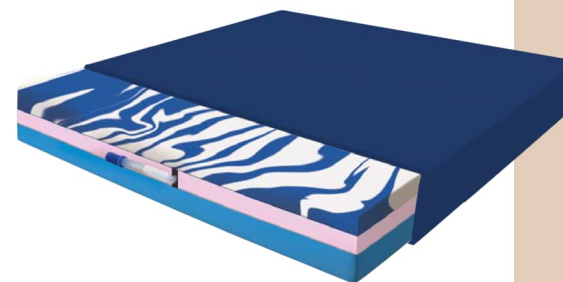

Eigenschaften Mesh-Bezug

- Abnehmbar, waschbar bis 60°C
- Mesh³-Gewebe zur Klimaregulierung

Besonderheiten

- Oberplatte aus Geltouch[®]-Schaum
- Einzigartiger Geltouch[®]-Schaum mit Cooling-Effekt
- Individuell einstellbar durch Ventil (Einhandbedienung)
- Kein Ausfallrisiko durch foam-in-cell-technology
- Sehr leicht – 70 % weniger Gewicht als herkömmliche Luftzellensitzkissen
- Anti-Slip-Unterseite
- Praktischer Tragegriff

3-Kammer-Sitzkissen

- Zwei Gelschaum-Zellen zur Entlastung der Sitzbeinhöcker
- Eine Viscoschaum-Zelle zur Entlastung des Kreuzbeins

Technische Daten

- Offenporiger atmungsaktiver Schaum
- Autoklavierbar
- Medizinprodukt nach der MDR
- Wartungsfrei
- Keine Pumpe oder andere Werkzeuge notwendig
- Patientengewicht: 0-200 kg

